



Inovys II Evo

Wózek multipozycyjny



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Maksymalny komfort

Projektując wózek inwalidzki odchylany do przestrzeni, naszym priorytetem jest wygoda. Oparty na naszej udanej ofercie Inovys, ten wózek inwalidzki zapewnia również doskonałe właściwości przeciwodleżynowe. Inovys II Evo został mądrze

zaprojektowany, aby odpowiadać indywidualnym potrzebom. Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia wszechstronność, nieograniczone możliwości regulacji i wygodę w połączeniu z odświeżonym wyglądem.



Tilt in space

Redukcja ciśnienia jest ważną zaletą Inovys II Evo. System odchylania przestrzennego (tzw. kołyska) obraca się płynnie wokół środka ciężkości użytkownika, bez rozciągania skóry użytkownika. Inne korzyści obejmują lepsze krążenie krwi, mniejsze obciążenie stawów i mięśni oraz pozytywnie wpływa na kręgosłup.



Indywidualne regulacje

Podczas całego dnia użytkowania możliwości regulacji i pozycjonowania muszą odpowiadać potrzebom użytkownika i zapewniać maksymalny komfort. Nasz system niewymagający użycia narzędzi umożliwia wprowadzanie zmian zapewniających wygodę zarówno użytkownikowi, jak i opiekunowi.




Regulacja wysokości rączek do pchania



Super komfortowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości. Regulowana głębokość siedzenia



Regulowany kąt nachylenia podnóżków. Regulowany kąt płyty pod stopę. Regulowane podparcie pod tyłkę

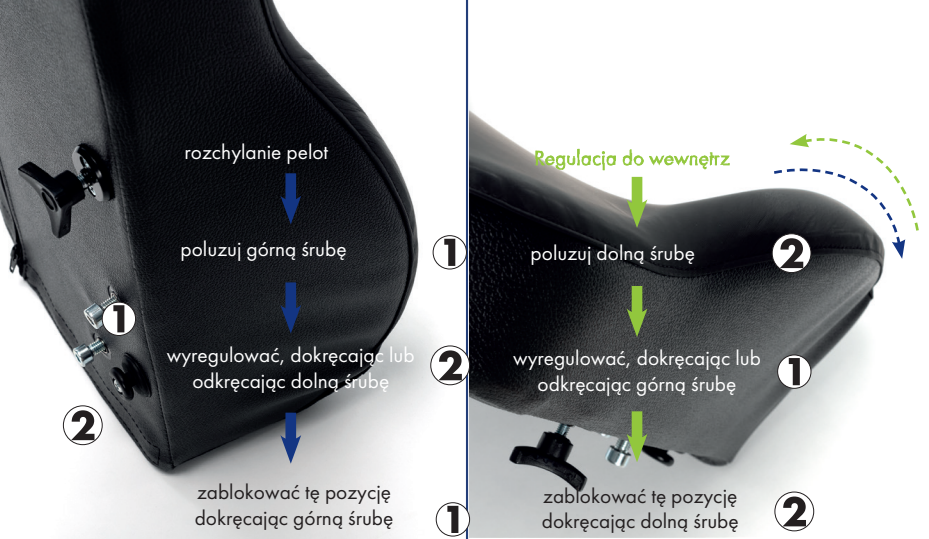

Stabilizacja

Inovys II Evo jest wyposażony w innowacyjne oparcie. Kiedy jest potrzeba poprawy stabilności użytkownika w wózku można zmienić położenie pelot oparcia bardziej dopasowując je do indywidualnych kształtów użytkownika. Zwiększmy w ten sposób stabilność oraz komfort. Wykorzystujemy dop tego celu dwie śruby na oparciu



Poduszki Vicair spełniają dwa najważniejsze filary siedzenia i pozycjonowania na wózkach inwalidzkich:

- Wysoka jakość ochrony skóry , redystrybując ciśnienie, minimalizując siły ścinające i kontrolując mikroklimat.
- Optymalne wsparcie stabilizując doskonale miednicę, dopasowując się do konturu ciała użytkownika.

■ Wysokość siedziska	460 - 530 mm
■ Wysokość oparcia	550 - 585 mm
■ Głębokość siedziska	460 - 520 mm
■ Waga	36 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	135 kg



Aby zapewnić osobom przebywającym w wózku dłuższy czas prawidłową postawę siedzącą i chronić przed deformacjami kręgosłupa, można wyposażyć go dodatkowo w tapicerkę holenderskiej firmy VICAIR®. Siedzisko i oparcie Multifunctional są pneumatycznymi wielokomorowymi poduszkami . Pozwalają zanurzyć miednicę i plecy na tyle głęboko , że siedzi się w sposób bardzo stabilny a zarazem komórki SmartCell™ , które stanowią czynnik aktywny wyrównują ciśnienie i odciążą miejsca wystających kości, gdzie najczęściej tworzą się odleżyny.

Dostępne kolory



C89 - Miedziany

Dane techniczne

■ Całkowita szerokość	630 - 680 - 730 mm
■ Całkowita wysokość	990 - 1060 mm
■ Całkowita długość	1010 - 1050 mm
■ Szerokość siedziska	400 - 450 - 500 mm
■ Kąt siedziska	0° - 21°
■ Kąt oparcia	0° - 54°

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka, rozmiaru kół, rodzaju podnóżków, rodzaju podłokietników, wysokości oparcia itp. Dopuszczalne odchylenia rozmiarów ± 15 mm, 1,5 kg) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych .

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl

Dystrybutor:

